






-  8chアナログ信号を同時入力が可能
-  マルチ表示が可能、変化のバランスが1画面に！
-  信号入力はUSB、A/D専用BOXと接続
-  測定/解析の場所を選ばず使いやすいNote Tipe PC



安心なオートデーブ機能

START と同時に自動でセーブが開始します。保存忘れがありません。

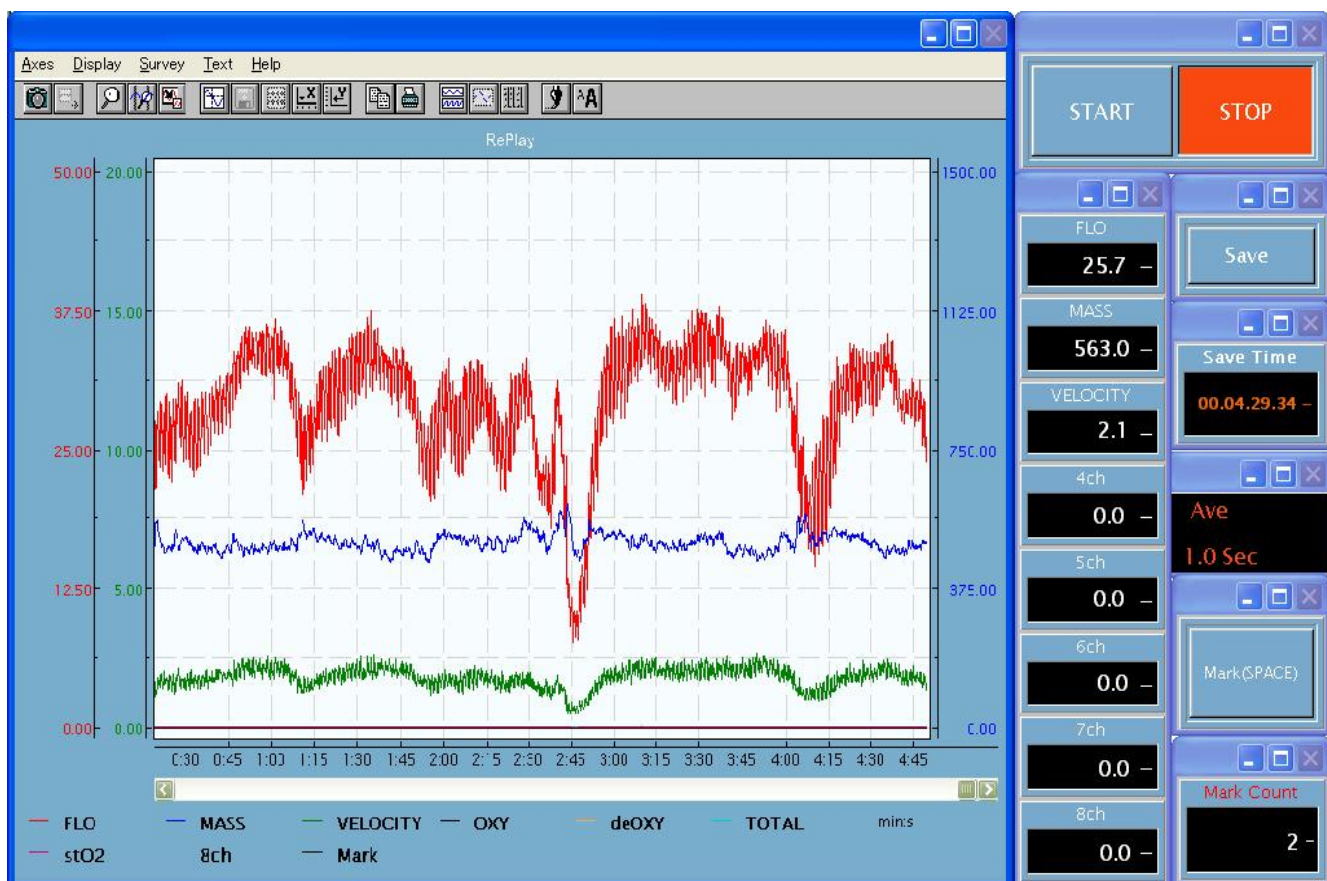データ上書き禁止機能

大切なデータをお守りいたします。


時間軸、レンジを測定中にも自由に変更可

表示機能に関しては、測定中、再生中自由に変更可能。
様々な値の表示が瞬時に行えます。



USB 接続

【波形測定例】

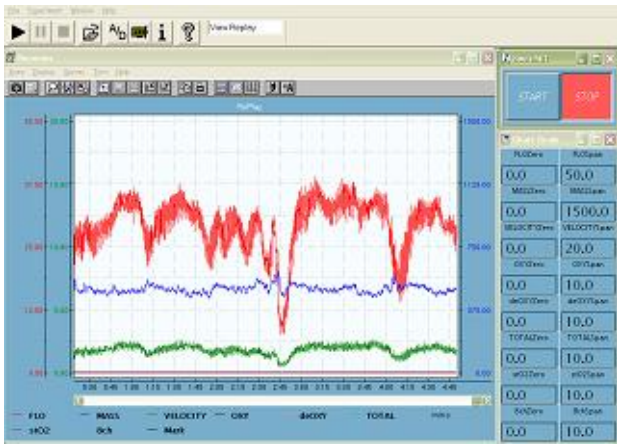

簡単な操作で波形表示、データ保存が同時に測定出来ます。


最大 8 c h までの同時測定が可能で、弊社機器に加え他のアナログ出力機器を接続する事によって同時測定、同時データ保存、同時考察が可能です。

測定中でも自由に縦軸（値）、横軸（時間軸）の変更が出来、操作によって保存データが変更されません。

測定中、マーキングが可能なので、イベントの Mark がデータに保存されます。

上書き禁止機能付きで、大切なデータお守りいたします。

【時間軸を自由に変更可能(測定中もOK!)】

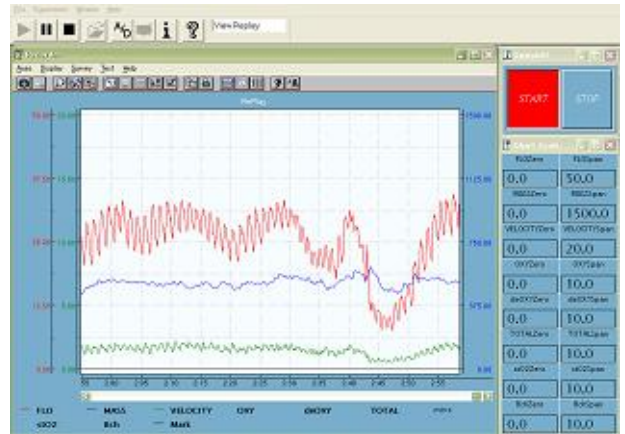


保存した測定データは、繰り返し何度でもReplayが可能です。

縦軸（値）を自由に変える事により、様々な値を1画面にて表示が可能です。

1画面に表示する事により、生体変化の情報をバランス良く考察する事ができます。

Data形式 .DDF

【テキストデータ表示変換 Excel】

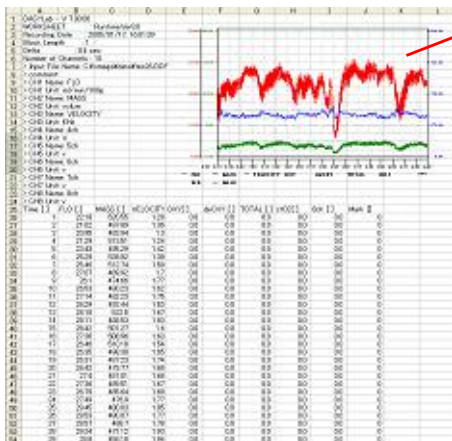

波形ペースト機能

Replay で表示した波形をそのままに貼り付ける事が可能です。

展開したデータの中に測定日、ファイル名など詳細を含んでいる為、管理が容易です。

データの管理が容易な1Seat, 1Data 保存。

Data形式 .DDF.ASC テキスト変換可

(MeasurementData)

For about 5Hour DDF = 6,800KB

DDF.ASC = 163KB

PC	Note type PC+ PCM CIA Card slot	
	CD-ROM Drive	
	Memory 256MB以上	
OS	CPU 750MHz以上	
	Windows XP, 2000	
Analogue	0 ~ +10V	
A/D	A/D box for USB	
Channel	8ch	
FLO Series	1ch ~ 4ch	
BOM Series	4ch	
Price	software+PC	¥ 600,000-
	Only software	¥ 400,000-

機能、仕様、レイアウトその他予告無く変更する場合がございます。



〒183-0021 東京都府中市片町2-20-3 サンノープル2F
 TEL:042-352-1171 FAX:042-352-1173
<http://www.omegawave.co.jp>